

徘徊お知らせ はるお君

卓上型受信機セット HCS-CS30(T) TAISコード 00021-000131

携帯型受信機セット HCS-CS30(KE) TAISコード 00021-000132



「徘徊お知らせ」と「緊急呼出」の2つの機能をもったセンサです。
離れたらお知らせして欲しいものにクリップを挟むだけの簡単運用。

運用

クリップ緊急センサ送信機を徘徊されたり、離れたらお知らせして欲しいものに挟み、紐が引っ張られると小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。

クリップ緊急センサ送信機

《2つの便利機能》

- 本体の呼出ボタンを押すと緊急時や呼出時の連絡用として使用できます。
- 離れたらお知らせして欲しいものにクリップを挟んで使用できます。

《豊富な付属品で簡単設置、運用》

- 長短2本のクリップ付き紐やカラビナを使い分け様々な用途に使用できます。
- 送信機本体は、付属の両面テープやマジックテープで簡単に取付けできます。

《入切スイッチ付き》

- スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。
(本体の「呼出」ボタンはON/OFF関係なく常時動作します。)
- 送信機の電池は単4形アルカリ乾電池2本で、約5年間(1日10回送信した場合)使用できます。
電池切れ報知機能付です。

《配線工事不要》

- 送信機から、受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。
ご家庭や施設にも簡単に設置できます。
- クリップ付き紐は一定の力がかかると外れる安心機能付きです。

用途

- ベッドからのナースコール呼出や、離床検知用途。
- 車椅子からの呼出や、立ち上がり検知用途。
- 歩行器からの呼出や、離脱お知らせ用途。
- トイレからの呼出や、離座お知らせ用途。

その他

《セット商品》

- クリップ緊急センサ送信機と受信機をセットにして、すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。

《増設できます》

- 卓上型受信機には最大30台、携帯型受信機には最大50台の送信機を登録できます。
受信機も増設可能です。

オプション品

《中継機 RTX-300》

- 電波が直接届かない場所に送信機からの電波を受信して受信機へ再送信します。
- 中間に1台設置すると、見通し100m電波距離を延長できます。




RTXF-300

徘徊お知らせ はるお君

■ 用途


- ベッドからの起き上がりや
ナースコール呼出に

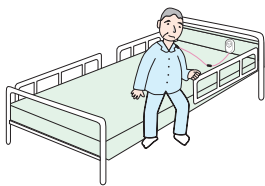

- 車椅子からの呼出や
立ち上がり検知に



- トイレからの呼出や
離座お知らせに

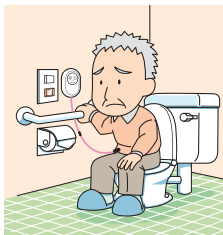

- 歩行器利用中の呼出や
歩行器離脱お知らせに



■ 付属品



マジックテープ



カラビナ



クリップ付き紐
(1.0～0.5m調整)





クリップ付き紐
(0.5～0.25m調整)

<クリップ付き紐は2種類付属し、長短調節できます>

- ①最長1.0m～最短0.5mで調整 ②最長0.5m～最短0.25mで調整
用途に合わせて簡単に付け替え出来ます。

■ 外形寸法図 (単位: mm)


■ HCT-CS30

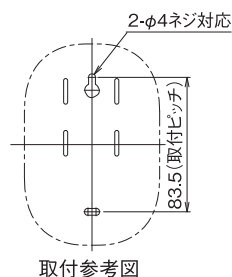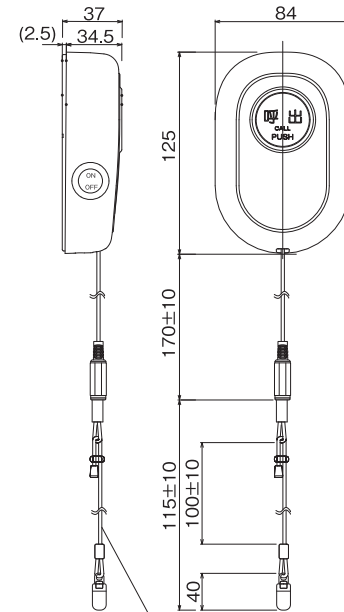


取付参考図

紐部長さ 最長1.0m～最短0.5m

■ HC-350

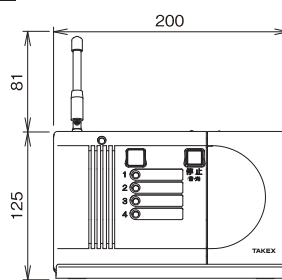

■ RXF-60K

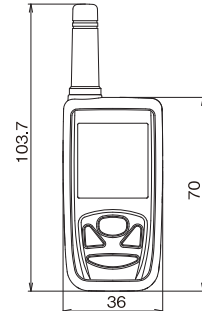


■ セット商品 受信機は2種類

用途に合わせて、受信機を2種類揃えています。あらかじめ電波登録してすぐにご使用いただけます。

- HCS-CS30(T)卓上型受信機セット(HCT-CS30+HC-350)
8通りのメロディやチャイムから選択でき、フラッシュライトで
視覚的にお知らせします。報知時間は3秒～120秒まで
7通りと「連続」を選択できます。



HCT-CS30

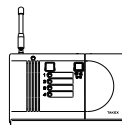

HC-350

- HCS-CS30(KE)携帯型受信機セット(HCT-CS30+RXF-60K)
充電式で専用充電器付です。超小型、手のひらサイズです。
ブザー音とバイブレーターを併用してお知らせすることが可能です。
お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択ができます。
任意で3桁のCH表示ができるわかりやすい液晶表示となっています。



HCT-CS30



RXF-60K

■ 品質保証とアフターサービス ■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認ください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

ヘルスケア事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085

札幌 (011) 281-4641	仙台 (022) 268-2411	郡山 (024) 962-4310	高崎 (027) 327-3981
さいたま (048) 653-7531	千葉 (043) 202-2551	東京 (03) 5805-8081	立川 (042) 540-1665
横浜 (045) 471-8467	長野 (026) 229-8130	静岡 (054) 254-8330	名古屋 (052) 209-9366
金沢 (076) 234-7201	京都 (075) 593-3171	大阪 (06) 6360-6881	神戸 (078) 230-6112
広島 (082) 223-1138	高松 (087) 821-0025	福岡 (092) 471-6245	熊本 (096) 387-3911
U.S. 408-747-0100	U.K. 01256-475555	AUS. 03-9544-2477	

<https://www.take-ex.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■ 販売店名 ■

CAT.NO.TD1911-01SL87-3