
# ベッドモニターケア

## MR-BMC1

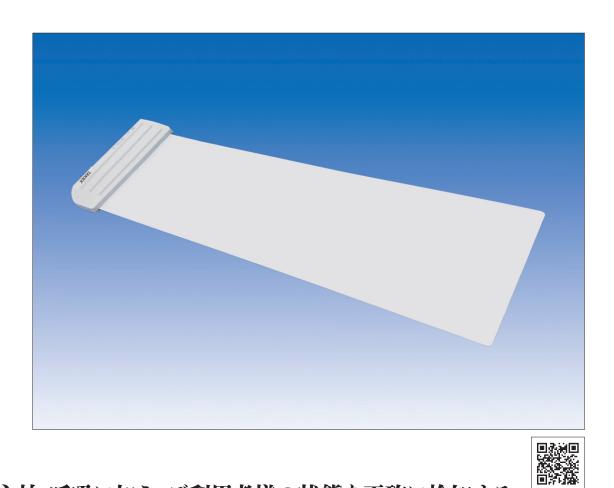

心拍・呼吸に加え、ご利用者様の状態を正確に検知する 高精度センサー。スタッフの負担軽減と転倒事故の低減が図れます

#### 概要

- ●ベッドのマットレスの下に同センサーを敷いて、介護施設、病院での 離床お知らせや、在宅での遠隔見守りとしてご使用いただけます。
- ●外部出力に別売の両端プラグ付ケーブル3m「HC-PP(3m)」を接続し、ジャック付送信機や分配コンセントに接続することで、他システムと連携可能です。
- ●Wi-Fiと接続し、スマートフォンやPCで、遠隔より個別に心拍や呼吸を確認したり、状態通知(入床、体動、起始、起上、在床、不在)や、ライフログを記録することができます。 ※別途Wi-Fi環境と、オプションサービスへの登録が必要



マットレスの下に置くだけの簡単設置です。

#### 特長

- ●専門的な知識が無くても、簡単に設置・設定を行っていただけるようになっております。
- ●iOS、Android(アンドロイド)、WEBブラウザ版3通りの アプリ・ソフトをご用意しております。 お手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンでご使用いただ くことができます。

#### オプションサービスでできること

- ①多数の利用者様の状況を一度に確認することができます。
- ②利用者様の様々な行動を検知し、ご使用の端末にお知らせします。
- ③WEBブラウザでご覧になる場合、利用者様の動作履歴、バイタルデータなどをグラフ化して表示します。 さらに、グラフ化したデータを出力することもできます。


#### ●推奨ご使用環境

マットレスの厚みは20cm以内のものをご使用ください。 ※エアマットレス、スプリングマットレス、ウォーターベッドでのご使用 はお控えください。

### ベッドモニターケア

#### ■ 4通りの使い方

#### システムイメージ および 必要機器

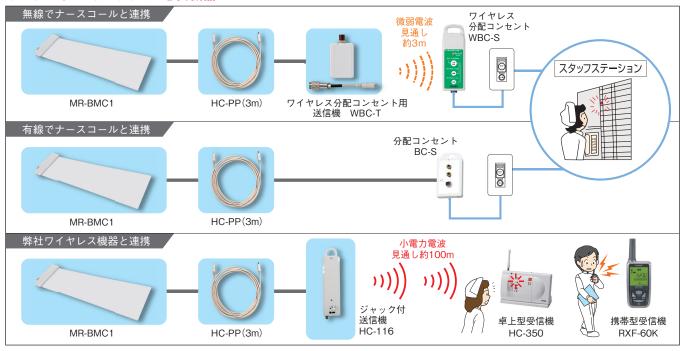




#### ■仕様

品 名	ベッドモニターケア
品 番	MR-BMC1
電源入力	AC100V~240V 50Hz/60Hz (ACアダプタ付属)
消費電力	5.3W
消費電流	200mA以下
Wi-Fi規 格	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
外部出力	無電圧接点a接点(接点容量DC30V・1A)
使用可能周囲温度	5℃~35℃(結露・氷結なきこと)
使用可能周囲湿度	30%~80%
外形寸法	本 体:W230×H800×D24.7mm ACアダプター:W33.8×H48.9×D25.4mm
設 置 場 所	屋内
質 量	本体:約590g ACアダプター:約80g
材 質	ケース部:樹脂(白) シート部:軟質PVC

#### ■ 外形寸法図 (単位: mm)

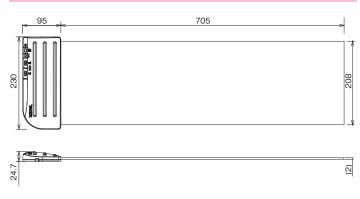

#### ■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。 ■保守点検■本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。 弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。 ■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途な どに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではあり ません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、 保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

## TAKEX

U.S. 408-747-0100

### 竹中エンジニアリング株式会社

AUS. 03-9544-2477

ヘルスケア事業部 事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085 札 幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎(027)327-3981 千葉 (043)202-2551 さいたま (048)653-7531 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665 横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪(06)6360-6881 神戸(078)230-6112 広島 (082)223-1138 高 松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911 ※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社に ご相談ください。

#### ■販売店名■

https://www.takex-eng.co.jp/

U.K. 01256-475555